


取扱説明書

コードレス首マッサージャー もみたいむ8821

品番

MCR8821

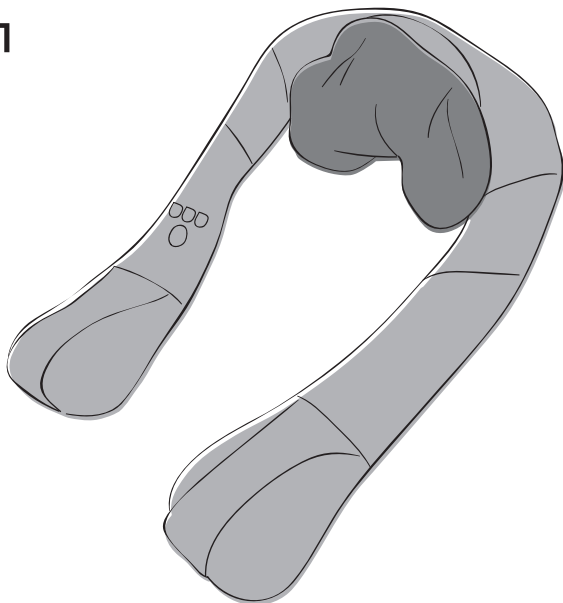

WEBカタログ



目次

警告・注意.....	1～4	お手入れ方法など.....	11
各部の名称.....	5	故障かな?と思う前に.....	12
ご使用方法.....	6～8	廃棄について.....	13
特長と効果・効能について.....	8	製品仕様.....	14
使用例.....	9	保証書.....	裏表紙
使用上の注意.....	10		

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

- 本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容に従って正しくお使いください。
- お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、大切に保管してください。
- 改良のため、デザイン、仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- 無断の複製は固く禁じます。

警告・注意

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の２段階に分けています。
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点検を行ってください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性がある内容です。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、軽傷を負ったり、物的損害が発生する可能性がある内容です。

絵表示の意味



必ず指示に従ってください。



分解をしないでください。



絶対に行わないでください。



確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

⚠ 警告



- 本製品は一般家庭用のマッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。
- この機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図していません。
- 眠気がするとき、または眠りながらの使用はしないでください。
- 直接骨部にあたる部位、頭部、顔面、首の前方には使用しないでください。
- 安全のため、ピンやボールペン、アクセサリなどの装飾品をポケットに入れたり、身につけたままでの使用はしないでください。施療部位に装身具をつけて使用しないでください。
- 本製品のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。
- 本製品や電源コードの上に座ったり乗ったり、物を置いたり、無理に力を掛けるご使用方法はおやめください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。

- 本製品を使用する前には、必ず保護カバー、カバーが破れていないかご確認ください。どんな小さな破れでも、直ちに専用ACアダプターのプラグを抜き、使用を中止してください。カバーが破れたままで使用するとケガや感電のおそれがあります。
- 布カバー、保護カバーを外した状態、破れた状態で使用しないでください。布カバー、保護カバーが破れた場合は使用を中止し、勝手に修理などせず、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- 布カバーは、付属のもの以外は使用しないでください。
- お子様には使用しないでください。保護者の方は、お子様が本製品を遊具として使用しないように十分ご注意ください。また、動物などを近づけないようご注意ください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど体調不良を起こすおそれがあります。
- マッサージは10分以上しないでください。またもみ玉を強く当てすぎたり、同じ部位へ3分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上の刺激を与え、皮膚を痛め、低温やけどのような症状になるなど逆効果となるおそれがあります。



- 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。
- ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感でない方は十分注意を払って使用してください。低温やけどの原因になります。
- ヒーター作動は10分以上ししないでください。熱さを感じなくとも、低温やけどになるおそれがあります。
- 使い始めは弱い刺激でマッサージしてください。
- 本機の連続使用時間は最大10分です。10分以上の連続作動はお止めください。また、ご使用後1時間はご使用にならないでください。故障の原因になります。
- ACアダプターは、指定された付属の専用ACアダプターを使用してください。異なるアダプターの接続は、火災や故障の原因になります。
- 全てのコードは容易に離脱しないように、正しく接続してください。
- 使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
- 医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例 血栓[血塞]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
- 心臓に障害のある人。
- 温度感覚喪失のある人。
- 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人。
- 皮膚に創傷のある人。
- 安静を必要とする人。
- 体温38℃以上(有熱期)の人。

例1 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。

例2 衰弱しているとき。

- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)

痛性】疾患の人。

- ケガをしている人。
 - かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。
 - 背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人。
 - けんしょう(腱鞘)炎の人。
 - その他、医療機関で治療中の人。
 - 上記以外に身体に異常を感じているとき
- しばらく使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談してください。



注 意



- 本製品は必ず屋内でご使用ください。



- 日本国内でご使用ください。

- ご使用前には、各ボタン、タイマーが正常に作動することを確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。



- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。



- 小さなお子様には機器の上で遊ばせない、及び上に乗らせないよう十分ご注意ください。
- 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くや、浴室など湿度の高い場所での使用・保管はしないでください。

保管・お手入れについての警告・注意事項

警告



- 使用時以外は専用ACアダプターをコンセントから抜き、保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。



- 本体・付属品などは、次回の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ないところに整理・保管をしてください。
- 専用ACアダプターのコードは、ねじれをほどいて使用・保管をしてください。
- 小さなお子様や、取扱説明書の内容が理解できない方がお一人で機器に触れ、誤った使用をしないように十分ご注意ください。誤った操作は事故の原因になります。
- 本製品は充電電池を内蔵していますので、直射日光が当たる場所や炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる場所、浴室などの湿度が高い場所には保管しないでください。
- お手入れの前には、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電のおそれがあります。

注意



- 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、ご使用ください。



- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。
- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。

電動機器の警告事項

—— 本製品はAC100V電源を使用します ——

警告



- ご使用後は必ず電源ボタンがOFFになっているか確認し、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ご使用にならないときや、雷が鳴り出したときには、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 停電のときには直ちに使用を中止し、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 専用ACアダプターは最後まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、感電・ショート・発火の原因になります。



- 室温が10℃以下・35℃以上の状態では使用しないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、製品の劣化も早めます。
- 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、浴室などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。



- コンセントから専用ACアダプターを抜き差しする時には、絶対に濡れた手で触ったり、専用ACアダプターのコードを引っ張ったりせず、必ず専用ACアダプター本体をつかんでコンセントから抜いてください。また、専用ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、差し込みがゆるんだ状態のままでの使用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 使用中及び本製品の移動・保管の際には、専用ACアダプターのコードの上に重量物を本製品を置かないようにご注意ください。断線や短絡・発火の原因になります。



- 使用の際、専用ACアダプターのコードは束ねず、ねじれをほどこして使用してください。また、コードにストレスがかかるような状態（コードが引っ張られたり、無理に曲げたり）で使用しないでください。
- 製品を落下や冠水させて破損した場合、絶対に使用せず弊社カスタマーサービス課にご連絡ください。
- 本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止し、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。機器が故障した場合、専用ACアダプターが破損した場合、内蔵充電機が消耗した場合には、勝手に修理などせず、弊社カスタマーサービス課に連絡してください。弊社以外での修理は行わないでください。

リチウムイオン充電機の警告事項

⚠ 警告



- 充電機を取り外したり、充電機のフィルムをはがしたり、分解・改造は行わないでください。



- 3時間以上の充電中での放置や、放電状態での放置は充電機の劣化を早める原因になります。



- 充電しながらの保管はしないでください。また、長期間使用しないときは満充電にしてから保管し、使用しなくても半年に一度は充電してください。
- 充電開始後3時間経過しても充電が完了しないときは、直ちに充電を中止してください。
- 充電機が充電できなくなった場合や、充電しても作動しない、作動時間が極端に短くなったときには、内蔵している充電機が消耗しています。充電機が消耗・劣化した状態では、通電・使用はしないでください。
- 充電機を取り外した状態で充電したり、機器に接続したりしないでください。


- 充電機を加熱したり、火中投下は行わないでください。
- 充電機をくぎなどの鋭いもので刺す、落とす、重量物を載せるなど、充電機に衝撃を与えないでください。
- 充電機のプラス端子とマイナス端子を金属などで接触させないでください。また、水などの液体に濡らしたり、濡れた手で触れないでください。
- 充電機を取り外した状態で、ネックレスやコイン、ヘアピンなどの金属類と一緒に保管したり持ち運んだりしないでください。
- 充電機の液がもれたときは、素手で液を触らないでください。また、身体や衣服に付いたときは、直ちにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やケガの症状があるときは、必ず医師の診察をうけてください。
- 充電機の液が目に入ったときは、直ちにきれいな水で洗い、必ず医師の診察を受けてください。

- 使用しても効果が現れないときは、医師又は専門家に相談ください。
- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- お買い上げ日より1年を過ぎた製品は、有償にて点検サービスも行っております。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの各自自治体の指導に従って処分してください。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

各部の名称

梱包をあけましたら電源を入れる前に、必ず付属品が揃っているかご確認ください。


■ 本体

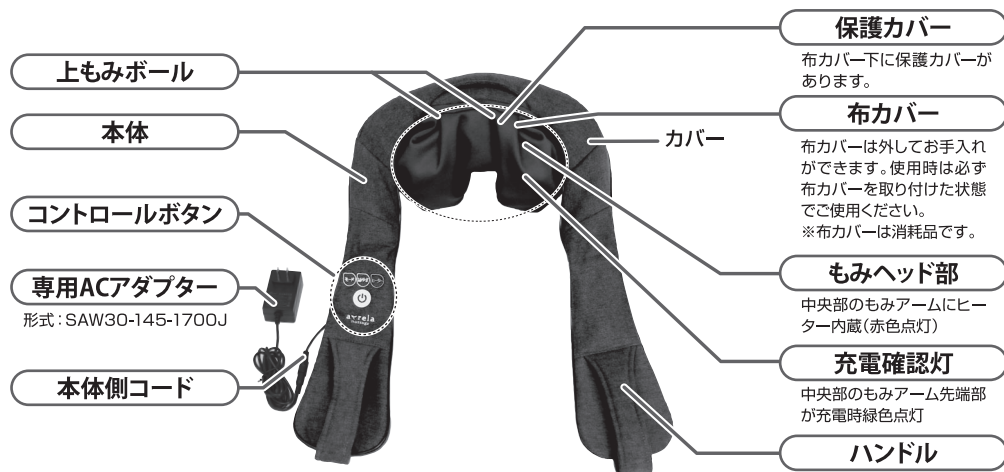

●保管の際、専用ACアダプターのコードをACアダプター本体や本製品に強く巻きつけたりしないでください。
断線や短絡・発火の原因になります。

■ コントロールボタンの名称

※短い間隔でのボタン連続押しは行わないでください。
電気部品保護のため、急な動作の切り換えはできないようになっています。

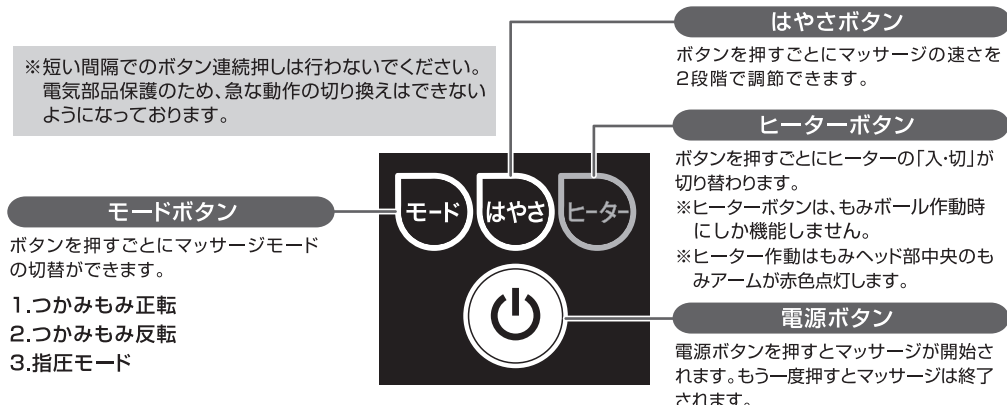

ご使用方法

本製品は、充電された内部充電電池、もしくは専用ACアダプターを接続してご使用になれます。はじめてご使用になるとき、または長期間ご使用にならなかったときは、充電電池が自己放電し動かないことがありますので、ご使用前には必ず充電してからお使いください。



■充電方法

1 専用ACアダプターのプラグをつなぎます。

まっすぐ根本までしっかり差し込んでください。

●本体側コード

●専用ACアダプター側コード

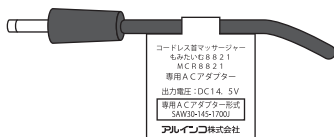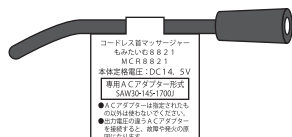


⚠ 警告

本製品付属の専用AC
アダプター以外を使用
しないでください。
故障や感電、漏電、発火
の原因になります。

2 専用ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます。

専用ACアダプター

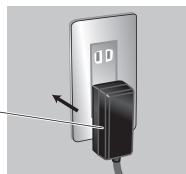

3 充電が開始されると、充電確認灯が緑色に点灯します。

充電が完了すると、充電確認灯が消灯します。専用ACアダプターを家庭用コンセントから外し、専用ACアダプター側コードを本体側コードから外してください。

充電が完了した後も接続したままにすると、自然放電により充電量が低下します。再度充電を行うには、アダプターのプラグやコンセントの差し直しを行ってください。なお、使用中は充電されません。

※空の状態から満充電まで約2時間30分かかります。充電が切れると充電確認灯(緑色)が点滅して動作が止まります。

※充電電池は、電池残量がない状態で放置しておくと劣化が早まります。長時間使用しないときは満充電にしてから保管し、使用しなくても半年に一度は充電をしてください。

■マッサージ方法



- 1 上もみボールのもみボール間距離を調整してください。距離は2段階で調整できます。

■もみボール間距離の調整方法

上もみボールは2段階で移動することができ、もみボール間距離を調整することができます。

1. イラストに描いてあるもみボールの位置を参考に、カバーの上から上もみボールを掴みます。
2. 上もみボールを掴んだ状態で上に持ち上げます。
3. 持ち上げた状態のまま横にスライドさせ、上もみボールを移動させます。

※上もみボールを調整する際は必ず保護カバーを付けた状態のまま行ってください。布カバーは着脱可能となっておりますが、保護カバー、及びカバーはリチウムイオン電池を廃棄する場合以外は取り外さないようにしてください。

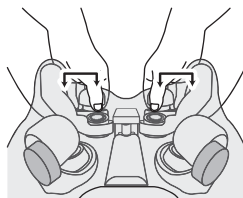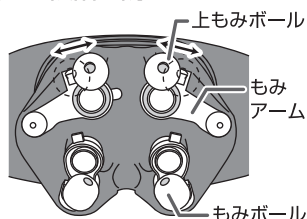

【電源ボタン】を押すと、もみボールのマッサージが開始されます。



【モードボタン】を押すと、マッサージモードが切り替わります。

つかみもみ正転 → つかみもみ反転 → 指圧モード



【はやさボタン】を押すと、もみボールの回転速度が【遅い⇒速い】に切り替わります。

※初めて使用される方は、もみ玉の回転速度【遅い】で使用し、使用感をご確認ください。



【ヒーターボタン】を押すと、もみヘッド部中央のもみアーム部のヒーターランプが点灯し、しばらくすると温まります。もう一度【ヒーターボタン】を押すとヒーターランプが消灯します。(ヒーターは人肌程度に温まります。)



もう一度【電源ボタン】を押すと、すべての動作が停止し、電源が切れます。専用ACアダプターを接続してご使用の場合は、専用ACアダプターをコンセントから抜き取ってください。



オートオフ機能について 開始後10分経過すると、自動的にマッサージが停止します。

■マッサージ方法

⚠ 警告

- 開始後10分経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。
- マッサージは10分以上しないでください。また、同じ部位へ3分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となるおそれがあります。
- モーターロックによって安全装置が働いた場合は、いったん電源をOFFにして、1分程度待ってから再度電源をONにしてください。

特長と効果・効能について

使用目的・効能または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこ

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の緩和
- 血行をよくする
- 筋肉のコリをほぐす

特 長

- 上部のもみボールは首をもみ、中央部のもみアームと下部のもみボールで肩をつかみほぐします。
- もみボールの回転速度が調節できます。

使用例

■首をマッサージする

1. 【電源ボタン】を押し、もみボールを作動させ、マッサージを開始します。
 2. 両手をハンドルの中に入れ、ハンドルを軽く下に引っ張り、本体もみヘッド部に首に当てます。ハンドルの引き加減でお好みの強度になるように調節してください。但し、過度にハンドルを引っ張るご使用は、ケガの原因になりますので、お止めください。
 3. もみボールが首を挟み込むように本製品を調節してください。
- ※首の前方は、マッサージしないでください。ケガや事故のおそれがあります。




■その他の使用イメージ

腰に使用する場合


腰に使用するときには、ハンドルを持ってお好みの位置をマッサージしてください。



ふとももに使用する場合

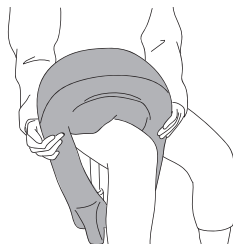

足の裏に使用する場合

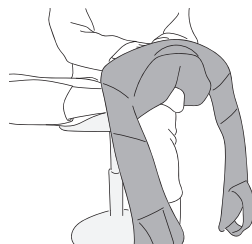

ふくらはぎに使用する場合



- マッサージをする際には、落としたときにケガをしないよう十分注意して使用してください。
- 使用例以外のマッサージには使用しないでください。また、直接骨部に当たる部位には使用しないでください。

使用上の注意

★痛みを我慢して続けるマッサージはお止めください。

摩擦で皮膚を傷めるおそれがあるため、直接素肌では使用せず、タオルなどをあてがい使用してください。

もみボールの刺激が強すぎるときもタオルなどをあてがい感触を調節してください。



- 人により必要なマッサージの時間・強度は異なります。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは、効果が無いばかりか筋肉痛や皮膚を傷めるなど逆効果にもなります。
- 痛みを少しでも感じた場合には、すぐに使用を中止してください。

⚠ 警告

- マッサージは10分以上しないでください。また同じ部位へ3分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となるおそれがあります。
- アクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- 直接骨部にあたる部位には使用しないでください。
- 本製品の上に座ったり、物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こすおそれがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故のおそれがあります。

お手入れ方法など

■お手入れ方法 (本製品を長期にわたりご使用いただくため、1ヶ月ごとに清掃・点検・保守を行ってください。)

●お手入れの前には、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

●本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れなどを拭き取ってください。また、汚れなどが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。このとき、シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはおやめください。シミや変形の原因になります。



■保管および廃棄について


- お子様の手の届くところに置かないでください。
- 温度、湿度の高いところや、直射日光の当たるところに置かないでください。
- 廃棄は必ず各自治体の指示に従ってください。

■布カバーのお手入れ方法

布カバーが汚れた場合は、本体から取り外し、ぬるま湯で手洗いしてください。


※洗濯機は使用しないでください。その他、布カバーに付いている洗濯絵表示に従ってお手入れしてください。

【布カバーの取りはずし方】

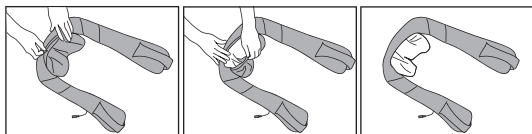

1. 専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
2. 面ファスナーおよび布カバーのファスナーを完全に外し、本体から取り外してください。

【布カバーの取り付け方】

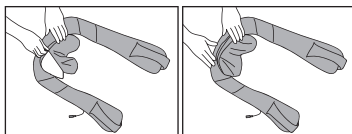

1. ACアダプターをコンセントから抜いてください。
2. 布カバーのファスナーを本体のファスナー取り付け部に差し込み、ファスナーを最後まで閉じます。
3. 布カバーを取り付けた後は、ファスナーのつまみで身体を傷つけないように、面ファスナーをファスナーのつまみにかぶせてください。

⚠ 警告

- ご使用時は必ず布カバーを取り付けた状態でご使用ください。布カバーを取り外した状態や破れた状態では使用しないでください。
- 布カバーを取り付けた後はファスナーのつまみで身体を傷つけないように面ファスナーをファスナーのつまみにかぶせてください。
- 弊社指定の布カバー以外は使用しないでください。
- 濡れた手で専用ACアダプターの抜き差しをしないでください。

■布カバーが破れたとき、傷んできたとき

布カバーは消耗品です。布カバーが破れたり、傷んできたときは、必ず弊社カスタマーサービス課にて専用布カバーをお買い求めください。

(有償となります。) 専用布カバーのお求めは、弊社カスタマーサービス課(フリーダイヤル0120-30-4515)までお問い合わせください。




故障かな？と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症 状	チェック箇所
●動かない	<p>➡ ○専用ACアダプターがコンセントに差し込まれていますか？</p> <p>○専用ACアダプター側プラグと本体側電源プラグはしっかり差し込まれていますか？</p> <p>○長時間の使用で本体が熱くなっていませんか？ (1時間程度時間を置いて本体内部の温度を下げてから使用してください。)</p> <p>○充電が切れていませんか？</p> <p>○周囲の温度が極端に低いまたは高い場合は、正常に充電しない場合があります。周囲温度10～35℃で充電を行ってください。</p> <p>○充電確認灯（緑色）が点滅している場合、充電してください。</p>
●もみ玉の動きが遅い・弱い	<p>➡ ○充電が少なくなっている場合があります。充電を行ってください。</p>
●停止する	<p>➡ ○無理な力をかけていませんか？ モーターロックによって安全装置が働いた場合は、いったん電源をOFFにして、1分程度待ってから再度電源をONにしてください。</p> <p>○開始後10分経過していませんか？自動タイマーが作動しています。</p>
●充電できない、充電しても電池持続時間が短い	<p>➡ ○充電池が充電できなくなった場合や、充電しても作動しない、作動時間が極端に短くなったときには、内蔵している充電池が消耗しています。ご使用を中止し、弊社カスタマーサービス課へご連絡ください。</p>

※確認後なお、異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず弊社カスタマーサービス課に相談ください。

お問い合わせは カスタマーサービス課

 **0120-30-4515** 受付時間 10:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝祭日、弊社休業日を除く）

本製品に使用しているリチウムイオン充電電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

ご使用済みの製品を廃棄する際は、リチウムイオン充電電池を取り出し、お近くの小型充電式電池のリサイクル協力店または公共施設などに設置のリサイクルボックスまでお持ちください。




Li-ion

警告


- 次の図は製品を廃棄するための分解図です。修理や電池交換用ではありません。廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。
- 必ず本体から専用ACアダプターを取り外してから分解してください。
- 動作が完全に止まるまで何回か電源を入れ、必ず充電電池を放電させてから分解してください。

充電電池の取り外し方


1. カバーを開けます。ハンドル部のコントロールボタン側の面を、ファスナーに沿ってハサミなどで切ってください。
※手や指などを切らないよう、ご注意ください。

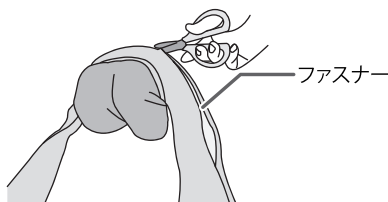

2. カバーを外し、緩衝材を剥がすと充電電池があります。

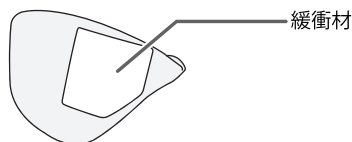

3. 充電電池から伸びているコードを、ハサミなどで1本ずつ全て切って充電電池取り外してください。
切り取ったコードにはそれぞれテープを貼り、取り外した充電電池の絶縁フィルムは、絶対に剥がさないでください。感電やショートの原因になります。

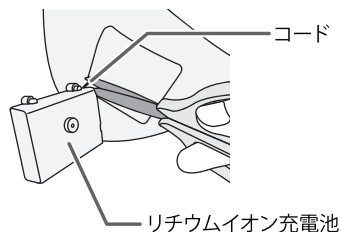

製品仕様

管 理 医 療 機 器	
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器
販 売 名	コードレス首マッサージャー もみたいむ8821
品 番	MCR8821
認 証 番 号	303AHBZX00002000
製 品 サ イ ズ	W445×D570×H210mm
製品質量(重量)	約1.95kg (ACアダプター含む)
定 格 電 圧	AC100V (50/60Hz)
定 格 消 費 電 力	14W (電熱部2W)
定 格 時 間	10分
主 な 材 質	本体：ウレタン、ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂) 布カバー：ポリエステル
専用ACアダプターの形式	SAW30-145-1700J
専用ACアダプターの定格	入力AC100V 50-60Hz 800mA 出力DC14.5V 1700mA
製 造 販 売 業 者	アルインコ株式会社
住 所	大阪府高槻市三島江1-1-1
生 産 国	中国

修理・
アフターサービスの
ご案内

 **アルインコ株式会社**
フィットネス事業部 カスタマーサービス課
フリーダイヤル  **0120-30-4515**

受付時間 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00（土・日・祝祭日、弊社休業日を除く）

※故障や異常が発生した場合、まずは本書P12「故障かな?と思う前に」をご確認ください。

左記以外受付

FAX : 072-678-6410

E-mail : fcs-syuuri@alinco.co.jp

FAX又はメールでのお問い合わせの場合、回答に時間を要する場合がございます。予めご了承ください。

この商品の
WEBページはこちら

